

适用于各种形状和尺寸的试样
适用于已镶嵌、未镶嵌或异形试样
可在多台机器间互换使用
有140、160和200 mm直径三种规格
由不锈钢或轻质铝材制成
双试样夹紧功能提高夹紧容量
一次可夹紧多达12个试样
可调孔径提升了灵活性
夹紧简单、迅速，为您节省宝贵时间

适用于各种形状
和尺寸的未镶或
已镶试样的试样
夹具座



完美制备的基础

金相试样的自动制备要求将试样水平夹紧于试样夹具座中。

Struers提供各种可同时夹紧3个或3个以上已镶或未镶试样的试样夹具座，可胜任各种形状和尺寸试样的夹紧。

各种试样夹具座均采用相同的轴接方式，可在多台Struers机器间互换使用。

试样夹具座有140、160和200 mm直径三种规格，均有不锈钢和铝质材质可选。

用于已镶或未镶试样的试样夹具座

Struers提供了用于已镶嵌、未镶嵌或异形试样的多种带有泪珠形或矩形试样孔的特殊试样夹具座。

带有矩形孔的试样夹具座可夹紧尺寸达70 x 53 mm的试样，而无需将试样切成小块。



Struers试样夹具座可夹紧各种形状和尺寸的试样




带有矩形孔的试样夹具座可夹紧尺寸达70 x 53 mm的试样



带夹钳的试样夹具座

需要夹紧线材端部或板材时，可选择该款试样夹具座。试样夹具座上装有3个独立的可拆式夹钳。您可很方便地固定多个试样、进行双面制备，甚至在制备前对夹钳中固定的试样进行切割。

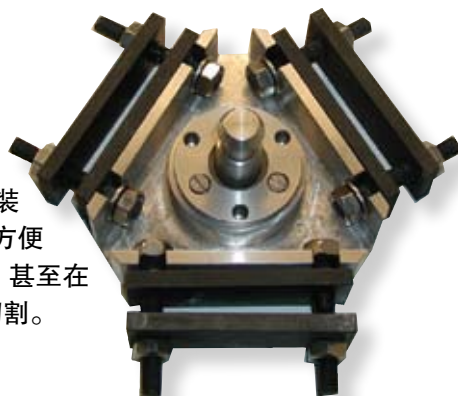

带夹钳的试样夹具座

定制解决方案

Struers还提供用于粘贴典型大平面平行试样的平面无孔试样夹具座。

这些试样夹具座还可用于为有特殊要求的客户定制解决方案。

应用

对于诸如MAPS或AbraPol之类的大功率设备，可采用直径最大达200 mm的试样夹具座。

Tegramin-30推荐使用直径为160 mm的试样夹具座，可使用最大直径为200 mm。

Tegramin-25推荐使用直径为140 mm的试样夹具座，可使用最大直径为160 mm。





试样移动盘

Struers提供了种类繁多的试样移动盘用于制备单个试样。

双夹紧功能 —节省时间、提高制备能力

一个螺钉固定两个试样

Struers还提供按照双试样夹紧原理设计的轻型铝质试样夹具座；用一个螺钉同时夹紧两个试样。该功能实现了试样的更快夹紧并提高了试样夹具座的夹紧容量。

双夹紧功能允许试样直径存在一定公差，使这些试样夹具座能够胜任各种试样的夹紧。

试样夹具座有140、160和200 mm直径三种规格，一次最多可固定12个试样。

Uniforce—实现快速精确校平

试样的高效夹紧可为后续制备步骤节省宝贵时间。

Struers的Uniforce可对固定在140、160和200mm直径试样夹具座中的试样进行快速精确校平。精确校平可将粗磨时间降至最低，为高质量快速金相试样制备创造最佳条件。

有了Uniforce，试样伸出试样夹具座的部分便可调节到3mm或6mm，其中3mm为标准外伸长度。

关于Uniforce的更多信息请参阅单独的产品手册。



双夹紧功能—一个螺钉固定两个试样



Uniforce

试样夹具座



简图	直径	名称	试样尺寸	产品号码
	140 mm	SAXCE	6 pcs. 29-32 mm (1 1/4") dia.	02606952
		PEDST	6 pcs. 10-32 mm dia.	02606935
		PEDAL		02606936
		PEDIS	4 pcs. 10-40 mm dia.	02606933
		PEDFI		02606934
		MAXAD		02606950
	160 mm	SAXDE	8 pcs. 29-32 mm (1 1/4") dia.	02606954
		SAXDI	6 pcs. 38-40 mm (1 1/2") dia.	02606955
		MAXCY	6 pcs. 10-40 mm dia.	02606916
		MAXLU		02606915
		MAXDU	12 pcs. 10-25.5 mm dia.	02606917
		MAXYK	6 pcs. 25x34 mm	02606918
		MAXDI	3 pcs. 48x40 mm *	02606920
		MAXAB	3 pcs. 24x52 mm	02606924
		MAXSO		02606926
		MAXAS		02606928
	200 mm	SAXFE	12 pcs. 29-32 mm (1 1/4") dia.	02606956
		SAXFI	8 pcs. 38-40 mm (1 1/2") dia.	02606957
		SAXFO	6 pcs. 49-52 mm (2") dia.	02606958
		MAXUK	5 pcs. 27-55 mm dia.	02606923
		MAXOT	3 pcs. 53x70 mm **	02606922
		MAXON		02606927
		MAXAN		02606929

本着持续改进产品的宗旨, Struers进行产品改进时保留不另行通知的权利。

*02606920试样夹具座也可用于镶嵌在FlexiForm (40300082) 中的试样。

**02606922试样夹具座也可用于镶嵌在FlexiForm (40300082) 中的试样。

代码符号	材质
代码	不锈钢
代码	铝制



司特尔 (上海) 国际贸易有限公司
中国上海市浦东新区张江高科技园区
张衡路1696号
邮编: 201203
电话: +86 (21) 6035 3900
传真: +86 (21) 6035 3999
邮箱: struers@struers.cn
www.struers.cn



Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

AUSTRALIA & NEW ZEALAND
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone: +61 7 3512 9600
Fax: +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

BELGIQUE (Wallonie)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIUM (Flanders)
Struers GmbH Nederland
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Telefoon: +31 (10) 599 7209
Fax: +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

CANADA
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Phone +1 905-814-8855
Fax +1 905-814-1440
info@struers.com

CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

CZECH REPUBLIC
Struers GmbH
Organizační složka
Havlíčková 361
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Phone +420 233 312 625
Fax +420 233 312 640
czechrepublic@struers.de

DEUTSCHLAND
Struers GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5
D-47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 486-0
Fax +49 (0) 2154 486-222
verkauf@struers.de

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F-94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

IRELAND
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel: +44 0845 604 6664
Fax: +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takara 3rd Building
18-6, Higashi Ueno 1-chome
Taïto-ku, Tokyo 110-0015
Phone +81 3 5688 2914
Fax +81 3 5688 2927
struers@struers.co.jp

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Telefoon: +31 (10) 599 7209
Fax: +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

ÖSTERREICH
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Ginzkeyplatz 10
A-5020 Salzburg
Telefon +43 662 625 711
Fax +43 662 625 711 78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46
poland@struers.de

ROMANIA
Struers GmbH
Sucursala Sibiu
Str.Scoala de Inot, nr. 18
RO-550005 Sibiu
Phone +40 269 244 558
Fax +40 269 244 559
romania@struers.de

SCHWEIZ
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnstraße 41
CH-8903 Birnsdorf
Telefon +41 44 777 63 07
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road,
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SUOMI
Struers Suomi
Kalevankatu 43
00180 Helsinki
Puhelin +358 0207 919 430
Faksi +358 0207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Ekbacksvägen 22
168 69 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel: +44 0845 604 6664
Fax: +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com