



- Performance améliorée d'au moins 60 %
- Nouvelle technique de tronçonnage
- Plus de tronçonnages par meule = coût unitaire réduit
- Disponible en deux nuances




Présentation de la technique de tronçonnage la plus avancée


Les nouvelles meules de tronçonnage pour métaux durs de Struers réduisent notablement le risque de brûlure grâce à une fabrication spécifique à densité variable. Cette fabrication produit une densité variable d'abrasifs le long de la surface de la meule, ce qui favorise la capacité de coupe en réduisant le risque de surchauffe.

Usure moindre

Le tronçonnage de matériaux très durs nécessite le changement fréquent de la meule. Les meules de tronçonnage Premium vous laissent le choix de décider si vous souhaitez les changer moins souvent ou bien exploiter leurs meilleures performances pour tronçonner plus rapidement.

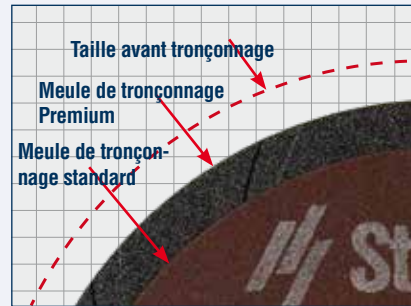

Usure d'une meule de tronçonnage standard
Struers avec les métaux ferreux durs en
comparaison de la meule Premium équivalente. **

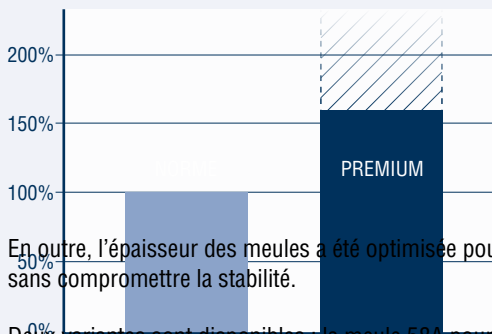

En outre, l'épaisseur des meules a été optimisée pour réaliser les meilleures performances possibles sans compromettre la stabilité.

Deux variantes sont disponibles : la meule 58A pour les métaux ferreux durs et la meule 68A pour les très durs. La surface du matériau 68A comporte plus d'abrasif plus fin, et convient par conséquent mieux pour les matériaux les plus durs. La meule 68A présente de meilleures propriétés de coupe, mais sa durée de vie est légèrement inférieure au 58A en raison de son liant plus tendre.

Meules de tronçonnage « intelligentes »

Comme nos meules de tronçonnage standard, les meules de tronçonnage Premium sont intelligentes. La densité de l'abrasif varie le long du rayon de la meule – elle augmente en allant vers le centre de la meule. Cela signifie que la performance de coupe de la meule reste constante quand elle s'use et que son diamètre diminue. Une meule conventionnelle a une densité d'abrasif uniforme, ses performances décroissent, au fur et à mesure de son usure. Le nombre de grains d'abrasifs se réduit, la charge appliquée à chaque grain augmente et la meule devient de plus en plus douce. L'inconvénient est une usure plus élevée et une coupe moins contrôlable.

SPÉCIFICATIONS

	Réf. cat.
Meule de tronçonnage Premium 58A35 Pour la coupe de métaux ferreux durs (HV 450-600). Avec design variable en spirale. Alumine. Liant résine. 350 mm (14") dia. x 2.2 mm x dia. 32 mm 10 pcs.	40009172
Meule de tronçonnage Premium 68A35 Pour la coupe de métaux ferreux très durs (>HV 600). Avec design variable en spirale. Alumine. Liant résine. 350 mm (14") dia. x 2.2 mm x dia. 32 mm 10 pcs.	40009173
Meule de tronçonnage Premium 58A435 Pour la coupe de métaux ferreux durs (HV 450-600). Avec design variable en spirale. Alumine. Liant résine. Dia. 432 mm (17") x 2.7 mm x dia. 32 mm 5 pcs.	40009174
Meule de tronçonnage Premium 68A43 Pour la coupe de métaux ferreux très durs (>HV 600). Avec design variable en spirale. Alumine. Liant résine. Dia. 432 mm (17") x 2.7 mm x dia. 32 mm 5 pcs.	40009175

* Visuellement, il n'y a pas de différence entre une coupe effectuée avec meule Struers standard ou Struers Premium. Cependant, les abrasifs plus agressifs sur les côtés des meules Premium entraînent une rugosité légèrement plus importante de la coupe.

** Test de la meule standard 50A35 par rapport à la meule Premium 58A35 – chacune effectuant trois tronçonnages de Ø 80 mm dans de l'acier de coupe trempé (60 HRC).

Les produits de Struers font l'objet de développement produit constant. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'introduire des changements dans nos produits sans préavis.

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone +61 7 3512 9600
Fax +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

BELGIUM (Wallonie)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIUM (Flanders)
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 599 7201
netherlands@struers.de

CANADA
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Phone +1 905-814-8855
Fax +1 905-814-1440
info@struers.com

CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
Struers GmbH Organizační složka
P lešské 1920,
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Phone +420 233 312 625
Fax +420 233 312 640
czechrepublic@struers.de
slovakia@struers.de

GERMANY
Struers GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5
D- 47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 486-0
Fax +49 (0) 2154 486-222
verkauf@struers.de

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F-94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

HUNGARY
Struers GmbH
Magyarországi Fióktelep
Tatai ut 53
2821 Gyermely
Phone +36 (34) 880546
Fax +36 (34) 880547
hungary@struers.de

IRELAND
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takanawa Muse Bldg. 1F
3-14-13 Higashi-Gotanda,
Shinagawa
Tokyo
141-0022 Japan
Phone +81 3 5488 6207
Fax +81 3 5488 6237
struers@struers.jp

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 599 7201
netherlands@struers.de

NORWAY
Struers ApS, Norge
Sjøskogveien 44C
1407 Vinterbro
Telefon +47 970 94 285
info@struers.no

AUSTRIA
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Telefon +43 6245 70567
Fax +43 6245 70567-78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46
poland@struers.de

ROMANIA
Struers GmbH, Sucursala Bucuresti
Str. Preciziei nr. 6R
062203 sector 6, Bucuresti
Phone +40 (31) 101 9548
Fax +40 (31) 101 9549
romania@struers.de

SWITZERLAND
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnstraße 41
CH-8903 Birmsdorf
Telefon +41 44 777 63 07
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road,
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SPAIN
Struers España
Camino Cerro de los Gamos 1
Building 1 - Pozuelo de Alarcón
CP 28224 Madrid
Teléfono +34 917 901 204
Fax +34 917 901 112
struers.es@struers.es

FINLAND
Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Puhelin +358 (0)207 919 430
Faksi +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Box 20038
161 02 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com