

Porte-échantillons pour échantillons de toutes formes et tailles

Porte-échantillons pour échantillons enrobés ou non-enrobés et irréguliers

Interchangeables d'une machine à l'autre

Disponibles en diamètres de 140, 160 et 200 mm

En acier inoxydable ou en aluminium léger

Bridage double pour une plus grande capacité

Jusqu'à 12 échantillons peuvent être bridés à la fois

Diamètre de trous réglable pour plus de flexibilité

Bridage rapide et facile pour épargner un temps précieux

**Porte-échantillons pour les échantillons enrobés à froid et à chaud, de toutes formes et tailles**



## La base d'une préparation parfaite

La préparation automatique des échantillons métallurgiques nécessite une mise à niveau des échantillons dans des porte-échantillons.

Struers offre un vaste choix de porte-échantillons pour le bridage de 3 échantillons ou plus, enrobés ou non-enrobés. Toutes sortes de formes et tailles peuvent être bridées.

Tous les porte-échantillons ont le même type d'accouplement, qui les rend interchangeables d'une machine Struers à l'autre.

Notre gamme de porte-échantillons comprend les diamètres 140, 160 et 200 mm en acier inoxydable et aluminium.

### Porte-échantillons pour les échantillons enrobés ou non-enrobés

Pour les échantillons enrobés, non-enrobés ou de forme irrégulière, Struers offre un certain nombre de porte-échantillons spéciaux avec orifices en forme de goutte ou rectangulaires.

Les porte-échantillons avec orifices rectangulaires peuvent contenir des échantillons jusqu'à 70x53 mm vous évitant d'avoir à tronçonner votre échantillon en pièces plus petites.


*Toutes sortes de formes et tailles peuvent être bridées dans les porte-échantillons Struers*



### Porte-échantillons à mordache

Ce porte-échantillon est pratique lorsqu'il s'agit de brider des fils ou plaques. Trois mordaches individuelles, détachables sont montées sur un porte-échantillons.

Ceci facilite la fixation de plusieurs échantillons, la préparation des deux faces, et même le tronçonnage des échantillons fixés dans les mordaches avant la préparation.

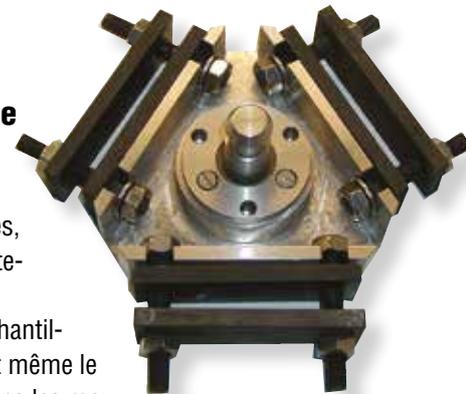

*Porte-échantillons à mordaches*

### Solutions sur mesure

Des porte-échantillons plans, sans trous pour faire adhérer les échantillons grands et plan-parallèles sont également disponibles. Ces porte-échantillons permettent également de créer des solutions sur mesure pour les clients avec des exigences spéciales.


### Application

Pour les machines de grande capacité telles que MAPS ou les machines AbraPol, des porte-échantillons d'un diamètre jusqu'à  $\varnothing 200$  peuvent être utilisés.

Sur Tegramin-30, les porte-échantillons de 160 mm de diamètre sont recommandés, mais il est possible d'utiliser des porte-échantillons jusqu'à 200 mm de diamètre. Sur Tegramin-25, les porte-échantillons de 140 mm de diamètre sont recommandés, mais des porte-échantillons jusqu'à 160 mm de diamètre peuvent être utilisés.



*Le porte-échantillons avec orifices rectangulaires peut contenir des échantillons jusqu'à 70x53 mm*

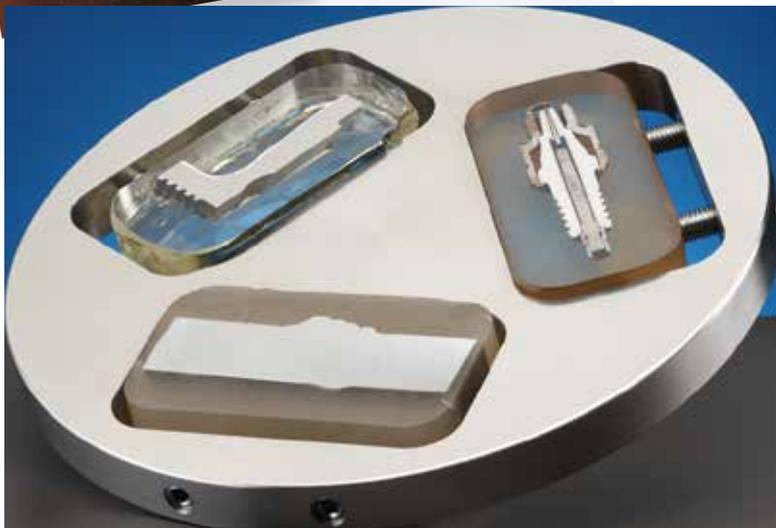



### **Plaques porte-échantillons**

Struers offre un grand choix de plaques porte-échantillons pour la préparation des échantillons individuels.

### **Bridage double - gagnez du temps et augmentez votre capacité**

#### **Une seule vis fixe 2 échantillons**

Le programme Struers inclut aussi des porte-échantillons légers en aluminium, conçus selon le principe de bridage double: Une seule vis fixe deux échantillons. Cette caractéristique facilite un bridage plus rapide et permet d'augmenter la capacité du porte-échantillons.

Le bridage double permet également une certaine tolérance pour ce qui est du diamètre de l'échantillon, ce qui rend ces porte-échantillons parfaits pour tous les échantillons. Ces porte-échantillons sont disponibles en trois tailles différentes:  $\varnothing 140$ ,  $\varnothing 160$  et  $\varnothing 200$  mm, et peuvent contenir jusqu'à 12 échantillons à la fois.



*Bridage double - deux échantillons sont bridés à l'aide d'une seule vis*


### **Uniforce - pour une mise à niveau rapide et précise**

Un bridage efficace des échantillons permet d'épargner un temps précieux aux étapes de préparation suivantes.

Avec Uniforce, Struers offre une mise à niveau rapide et précise des échantillons dans des porte-échantillons de 140, 160 et 200 mm de diam. Une mise à niveau précise vous permettra de réduire votre temps de prépolissage plan à un minimum et de garantir les meilleures conditions possibles pour une préparation métallographique rapide et de haute qualité.

Avec Uniforce, la projection des échantillons du porte-échantillons peut être réglée à 3 ou 6 mm, 3 mm étant standard.















Pour des informations plus détaillées sur Uniforce, veuillez vous reporter à la brochure à ce sujet.

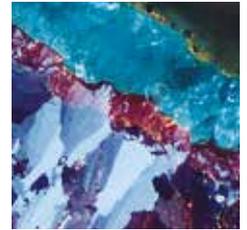

*Uniforce*

## Porte-échantillons

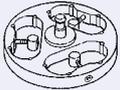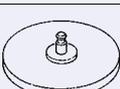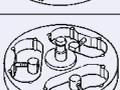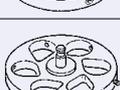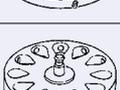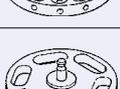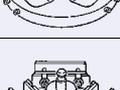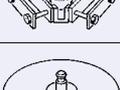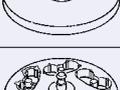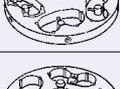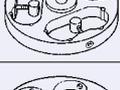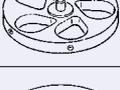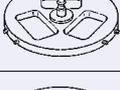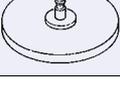

Dessin	Diamètre	Nom	Dim. échantillon	No. de cat.
	140 mm	SAXCE	6 29-32 mm dia.	02606952
		PEDST	6 10-32 mm dia.	02606935
		PEDAL		02606936
		PEDIS	4 10-40 mm dia.	02606933
		PEDFI		02606934
		MAXAD		02606950
	160 mm	SAXDE	8 29-32 mm dia.	02606954
		SAXDI	6 38-40 mm dia.	02606955
		MAXCY	6 10-40 mm dia.	02606916
		MAXLU		02606915
		MAXDU	12 10-25.5 mm dia.	02606917
		MAXYK	6 25x34 mm	02606918
		MAXDI	3 68x40 mm *	02606920
		MAXAB	3 24x52 mm	02606924
		MAXSO		02606926
		MAXAS		02606928
	200 mm	SAXFE	12 29-32 mm dia.	02606956
		SAXFI	8 38-40 mm dia.	02606957
		SAXFO	6 49-52 mm dia.	02606958
		MAXUK	5 27-55 mm dia.	02606923
		MAXOT	3 53x70 mm **	02606922
		MAXON		02606927
		MAXAN		02606929

Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements. Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable.

\* Le porte-échantillons 02606920 peut également être utilisé pour les échantillons enrobés dans FlexiForm, 40300082.

\*\* Le porte-échantillons 02606922 peut également être utilisé pour les échantillons enrobés dans FlexiForm, 40300083.

Symboles de code	Légende
Code	Acier inoxydable
Code	Aluminium

**AUSTRALIAN & NEW ZEALAND**  
**Struers Australia**  
27 Mayneview Street  
Milton QLD 4064  
Australia  
Phone +61 7 3512 9600  
Fax +61 7 3369 8200  
info.au@struers.dk

**BELGIUM (Wallonie)**  
**Struers S.A.S.**  
370, rue du Marché Rollay  
F- 94507 Champigny  
sur Marne Cedex  
Téléphone +33 1 5509 1430  
Télécopie +33 1 5509 1449  
struers@struers.fr

**BELGIUM (Flanders)**  
**Struers GmbH Nederland**  
Zomerdijk 34 A  
3143 CT Maassluis  
Telefoon +31 (10) 599 7209  
Fax +31 (10) 5997201  
netherlands@struers.de

**CANADA**  
**Struers Ltd.**  
7275 West Credit Avenue  
Mississauga, Ontario L5N 5M9  
Phone +1 905-814-8855  
Fax +1 905-814-1440  
info@struers.com

**CHINA**  
**Struers Ltd.**  
No. 1696 Zhang Heng Road  
Zhang Jiang Hi-Tech Park  
Shanghai 201203, P.R. China  
Phone +86 (21) 6035 3900  
Fax +86 (21) 6035 3999  
struers@struers.cn

**CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA**  
**Struers GmbH Organizační společnost**  
v dekotechnický park  
Přílepská 1920,  
CZ-252 63 Roztoky u Prahy  
Phone +420 233 312 625  
Fax +420 233 312 640  
czechrepublic@struers.de  
slovakia@struers.de

**GERMANY**  
**Struers GmbH**  
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5  
D- 47877 Willich  
Telefon +49 (0) 2154 486-0  
Fax +49 (0) 2154 486-222  
verkauf@struers.de

**FRANCE**  
**Struers S.A.S.**  
370, rue du Marché Rollay  
F-94507 Champigny  
sur Marne Cedex  
Téléphone +33 1 5509 1430  
Télécopie +33 1 5509 1449  
struers@struers.fr

**HUNGARY**  
**Struers GmbH**  
Magyarország: Fióktelep  
Tatai út 53  
2821 Gyermely  
Phone +36 (34) 880546  
Fax +36 (34) 880547  
hungary@struers.de

**IRELAND**  
**Struers Ltd.**  
Unit 11 Evolution@ AMP  
Whittle Way, Catcliffe  
Rotherham S60 5BL  
Tel. +44 0845 604 6664  
Fax +44 0845 604 6651  
info@struers.co.uk

**ITALY**  
**Struers Italia**  
Via Monte Grappa 80/4  
20020 Arese (MI)  
Tel. +39-02/38236281  
Fax +39-02/38236274  
struers.it@struers.it

**JAPAN**  
**Marumoto Struers K.K.**  
Takanawa Muse Bldg. 1F  
3-14-13 Higashi-Gotanda,  
Shinagawa  
Tokyo  
141-0022 Japan  
Phone +81 3 5488 6207  
Fax +81 3 5488 6237  
struers@struers.co.jp

**Struers ApS**  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Denmark  
Phone +45 44 600 800  
Fax +45 44 600 801  
struers@struers.dk  
www.struers.com

**NETHERLANDS**  
**Struers GmbH Nederland**  
Zomerdijk 34 A  
3143 CT Maassluis  
Telefoon +31 (10) 599 7209  
Fax +31 (10) 5997201  
netherlands@struers.de

**NORWAY**  
**Struers ApS, Norge**  
Sjøslogeneveien 44C  
1407 Vinterbro  
Telefon +47 970 94 285  
info@struers.no

**AUSTRIA**  
**Struers GmbH**  
Zweigniederlassung Österreich  
Betriebsgebiet Puch Nord 8  
5412 Puch  
Telefon +43 6245 70567  
Fax +43 6245 70567-78  
austria@struers.de

**POLAND**  
**Struers Sp. z o.o.**  
Oddział w Polsce  
ul. Jasnogórska 44  
31-358 Kraków  
Phone +48 12 661 20 60  
Fax +48 12 626 01 46  
poland@struers.de

**ROMANIA**  
**Struers GmbH, Sucursala Bucuresti**  
Str. Preciziei nr. 6R  
062203 sector 6, Bucuresti  
Phone +40 (31) 101 9548  
Fax +40 (31) 101 9549  
romania@struers.de

**SWITZERLAND**  
**Struers GmbH**  
Zweigniederlassung Schweiz  
Weissenbrunnstraße 41  
CH-8903 Birmsdorf  
Telefon +41 44 777 63 07  
Fax +41 44 777 63 09  
switzerland@struers.de

**SINGAPORE**  
**Struers Singapore**  
627A Aljunied Road,  
#07-08 BizTech Centre  
Singapore 389842  
Phone +65 6299 2268  
Fax +65 6299 2661  
struers.sg@struers.dk

**SPAIN**  
**Struers España**  
Camino Cerro de los Gamos 1  
Building 1 - Pozuelo de Alarcón  
CP 28224 Madrid  
Teléfono +34 917 901 204  
Fax +34 917 901 112  
struers.es@struers.es

**FINLAND**  
**Struers ApS, Suomi**  
Hietalahdenranta 13  
00180 Helsinki  
Puhelin +358 (0)207 919 430  
Faksi +358 (0)207 919 431  
finland@struers.fi

**SWEDEN**  
**Struers Sverige**  
Box 20038  
161 02 Bromma  
Telefon +46 (0)8 447 53 90  
Telefax +46 (0)8 447 53 99  
info@struers.se

**UNITED KINGDOM**  
**Struers Ltd.**  
Unit 11 Evolution @ AMP  
Whittle Way, Catcliffe  
Rotherham S60 5BL  
Tel. +44 0845 604 6664  
Fax +44 0845 604 6651  
info@struers.co.uk

**USA**  
**Struers Inc.**  
24766 Detroit Road  
Westlake, OH 44145-1598  
Phone +1 440 871 0071  
Fax +1 440 871 8188  
info@struers.com