

Perfekt für schnelle Ergebnisse

- All-In-One Suspension
- Bis zu 30% geringere Präparationszeit
- Einfache Anwendung und Reinigung




Schnellere Präparationszeiten und hervorragende Ergebnisse

DiaPro ist eine komplette Serie spezieller Diamantsuspensionen für die Materialografie die Präparationen schneller, kostengünstiger und einfacher machen.



Entwickelt und optimiert für maximale Leistung


Ausführliche Tests haben gezeigt, dass die Präparationsoberfläche, z.B. die Gewebestruktur eines Tuches, extrem starken Einfluss auf die Wirksamkeit der eingesetzten Diamantsuspensionen hat. Jede DiaPro Suspension ist speziell entwickelt und optimiert für den Einsatz auf einer korrespondierenden Oberfläche, einer Schleifscheibe oder einem Poliertuch, um maximale Effizienz zu gewährleisten. DiaPro Suspensionen zusammen mit der jeweiligen Oberfläche resultieren in schnelleren Ergebnissen, kostengünstig und reproduzierbar.

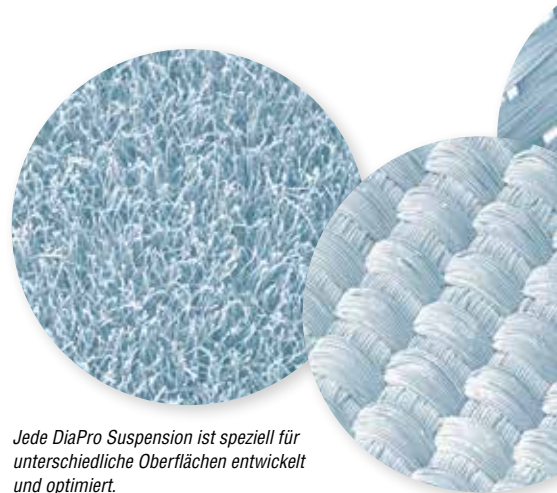

Jede DiaPro Suspension ist speziell für unterschiedliche Oberflächen entwickelt und optimiert.



Materialabtrag

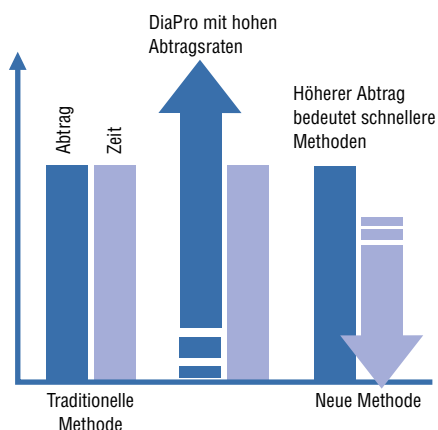

Reduzierung der Präparationszeit um durchschnittlich 30%

DiaPro Suspensionen sind speziell für hohe Abtragsraten entwickelt. Tests haben gezeigt, dass DiaPro Präparationszeiten um 20-60% reduzieren kann verglichen mit traditionellen Diamantprodukten, abhängig von der verwendeten Oberfläche und der individuellen Präparationsmethode.


Hohe Abtragsraten bedeuten schnellere Präparation. Sie sparen Verbrauchsmaterial, Arbeits- und Maschinenzeit. Die Präparationen sind durch konstante Dosierung effizient und reproduzierbar – bei höchster Qualität.

7 gute Gründe, sich für DiaPro zu entscheiden


- Höherer Abtrag = kürzere Präparationszeiten
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Nur eine Dosierung
- Praktisch keine Einfahrzeit
- Einfache Reinigung
- Wasserbasiert, umweltfreundlich
- Entwickelt, produziert und getestet von Struers

Einfahrzeit


Mit traditionellen Diamantprodukten benötigen Tücher 5-15 Minuten Einfahrzeit, Struers-Tücher in Kombination mit DiaPro reduzieren diese Zeiten drastisch.

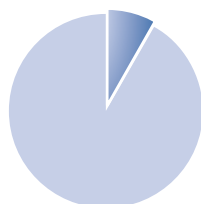

Struers' Tücher

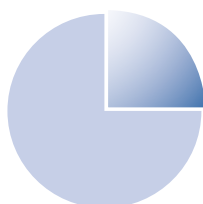


Andere Tücher

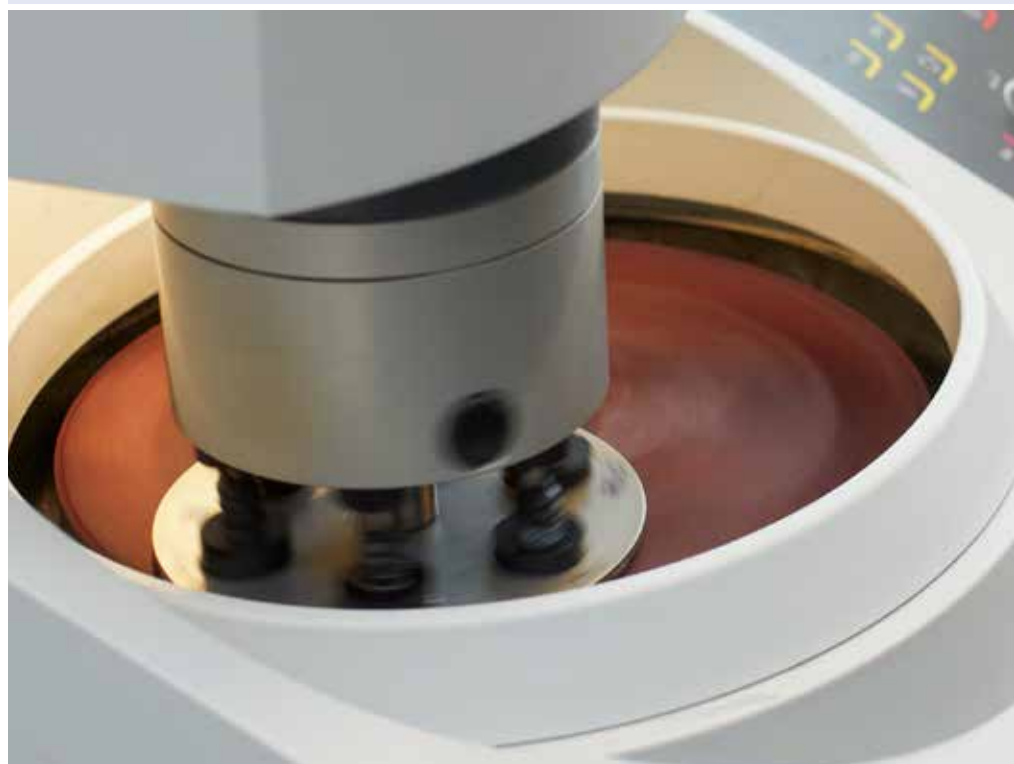

Probenpräparation einfach und effizient

DiaPro ist eine einfach anwendbare All-In-One Suspension, in der das Mischungsverhältnis hochwertiger Diamanten und Schmiermittel für die jeweilige Präparationsoberfläche optimiert ist. Diamanten werden so immer richtig dosiert, um maximale Abtragsleistung zu erzielen. Intensive Forschungen in den Struers Laboren haben die Leistungsfähigkeit der Suspensionen noch weiter gesteigert. Mit DiaPro dosieren Sie immer richtig.

Hohe Abtragsraten bedeuten gleichzeitig viel Abrieb. Mit DiaPro Suspensionen ist die Reinigung von Proben und Geräten sehr einfach.

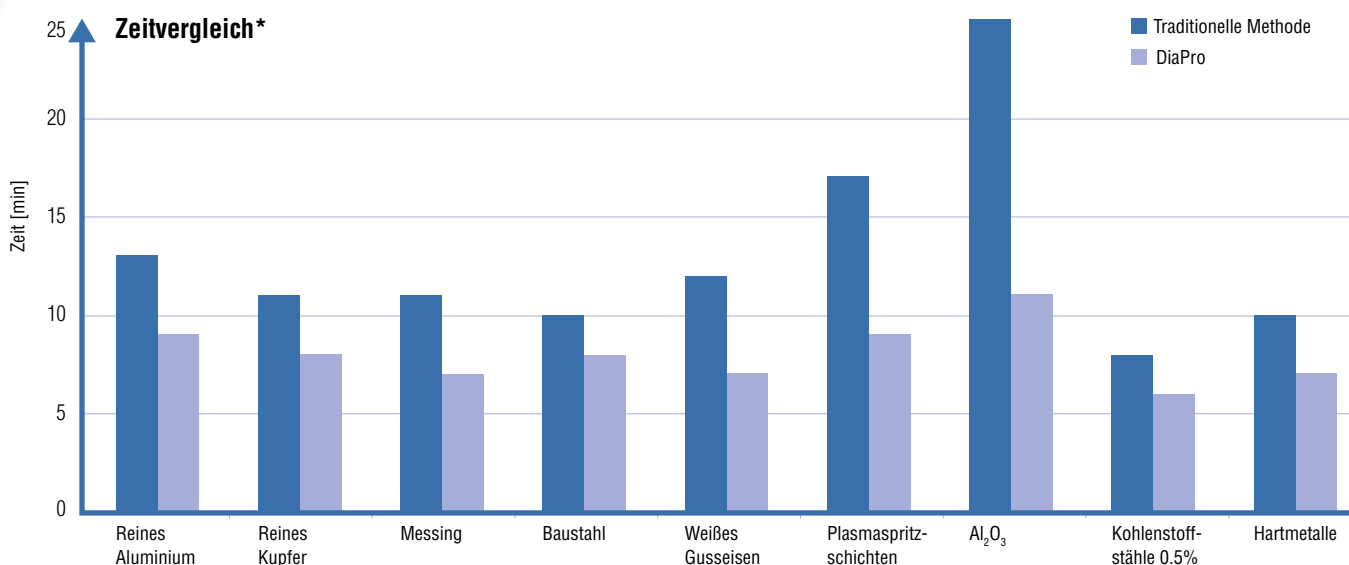

SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.

DiaPro

DiaPro ist eine komplette Serie spezieller Diamantsuspensionen für die Materialografie, die Präparationen schneller, kostengünstiger und einfacher machen. Jede DiaPro Suspension ist speziell entwickelt und optimiert für den Einsatz auf einer korrespondierenden Oberfläche.

DiaPro Pan 15 µm

Zum Feinschleifen auf MD-Pan und DP-Pan

500 ml

40600375

5 l

40600376

DiaPro Allegro/Largo 9 µm

Zum Feinschleifen auf MD-Allegro und MD-Largo

500 ml

40600369

5 l

40600370

DiaPro Plan 9 µm

Zum Polieren auf MD-Plan und DP-Plan

500 ml

40600385

5 l

40600386

DiaPro Sat 6 µm

Zum Polieren auf MD-Sat und DP-Sat

500 ml

40600377

5 l

40600378

DiaPro Largo 3 µm

Zum Polieren auf MD-Largo

500 ml

40600391

5 l

40600392

DiaPro Mol B 3 µm

Zum Polieren harter Werkstoffe (>150 HV) auf MD-Mol und DP-Mol

500 ml

40600379

5 l

40600380

DiaPro Mol R 3 µm

Zum Polieren weicher Werkstoffe (<150 HV) auf MD-Mol und DP-Mol

500 ml

40600393

5 l

40600394

DiaPro Dur 3 µm

Zum Polieren auf MD-Dur und DP-Dur

500 ml

40600395

5 l

40600396

DiaPro Dac 3 µm

Zum Polieren auf MD-Dac und DP-Dac

500 ml

40600371

5 l

40600372

DiaPro Plus 3 µm

Zum Polieren auf MD-Plus und DP-Plus

500 ml

40600387

5 l

40600388

DiaPro Flocc 3 µm

Zum Polieren auf MD-Flocc und DP-Flocc

500 ml

40600389

5 l

40600390

DiaPro Dur 1 µm

Zum Polieren auf MD-Dur und DP-Dur

500 ml

40600381

5 l

40600382

DiaPro Nap B 1 µm

Zum Polieren harter Werkstoffe (>150 HV) auf MD-Nap und DP-Nap

500 ml

40600373

5 l

40600374

DiaPro Nap R 1 µm

Zum Polieren weicher Werkstoffe (<150 HV) auf MD-Nap und DP-Nap

500 ml

40600397

5 l

40600398

DiaPro Nap ¼ µm

Zum Polieren auf MD-Nap und DP-Nap

500 ml

40600383

5 l

40600384

Dosierer

Für manuelle Dosierung

Dosierspritze leer, 500 ml

40700031

Spritzflasche leer, 250 ml

40700032

Informationen zu automatischen Dosiersystemen entnehmen Sie bitte separaten Broschüren.

Struers Produkte werden ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns daher Änderungen ohne Ankündigung vor.

Ihr Arbeitsumfeld ist uns wichtig

DiaPro Suspensionen sind wasserbasiert und enthalten keine Lösungsmittel.

Sie sind als umweltfreundlich eingestuft und deshalb die erste Wahl für Verbrauchsmaterial. Die Produkte sind sehr stabil und setzen sich nicht ab. Damit ist höchste Qualität und Reproduzierbarkeit gewährleistet.



DiaPro Suspensionen sind in 500 ml und 5 l erhältlich.

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark

Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road,
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SPAIN
Struers España
Camino Cerro de los Gamos 1
Building 1 - Pozuelo de Alarcón
CP 28224 Madrid
Teléfono +34 917 901 204
Fax +34 917 901 112
struers.es@struers.es

FINLAND
Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Puhelin +358 (0)207 919 430
Faksi +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Box 20038
161 02 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone +61 7 3512 9600
Fax +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

BELGIUM (Wallonie)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIUM (Flanders)
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

CANADA
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Phone +1 905-814-8855
Fax +1 905-814-1440
info@struers.com

CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
Struers GmbH Organiza ni slozka
v deokotechnický park
P ílepská 1920,
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Phone +420 233 312 625
Fax +420 233 312 640
czechrepublic@struers.de
slovakia@struers.de

GERMANY
Struers GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5
D- 47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 486-0
Fax +49 (0) 2154 486-222
verkauf@struers.de

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F-94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

HUNGARY
Struers GmbH
Magyarország Fióktelep
Tatai ut 53
2821 Gyermely
Phone +36 (34) 880546
Fax +36 (34) 880547
hungary@struers.de

IRELAND
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution@ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takanawa Muse Bldg. 1F
3-14-13 Higashi-Gotanda,
Shinagawa
Tokyo
141-0022 Japan
Phone +81 3 5488 6207
Fax +81 3 5488 6237
struers@struers.co.jp

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

NORWAY
Struers ApS, Norge
Sjøskogenveien 44C
1407 Vinterbro
Telefon +47 970 94 285
info@struers.no

AUSTRIA
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Telefon +43 6245 70567
Fax +43 6245 70567-78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46
poland@struers.de

ROMANIA
Struers GmbH, Sucursala Bucuresti
Str. Preciziei nr. 6R
062203 sector 6, Bucuresti
Phone +40 (31) 101 9548
Fax +40 (31) 101 9549
romania@struers.de

SWITZERLAND
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstraße 41
CH-8903 Birmensdorf
Telefon +41 44 777 63 07
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

Ensuring Certainty

Mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften in 24 Ländern und Präsenz in mehr als 50 Ländern ist Struers der Weltmarktführer als Anbieter für materialographische Lösungen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden maximale Prozesssicherheit und Qualität für alle Abläufe der materialographischen Präparation und Prüfung sowie für die Härteprüfung zu gewährleisten - überall auf der Welt. Struers bietet die komplette Produktpalette für Geräte, Verbrauchsmaterial, Service und Schulungsprogramme - basierend auf umfangreichem Wissen, globaler Applikationsunterstützung und einer zuverlässigen Serviceorganisation.

Besuchen Sie uns!

Kontaktieren Sie noch heute Ihren Struers Ansprechpartner oder besuchen Sie uns auf www.struers.com

