



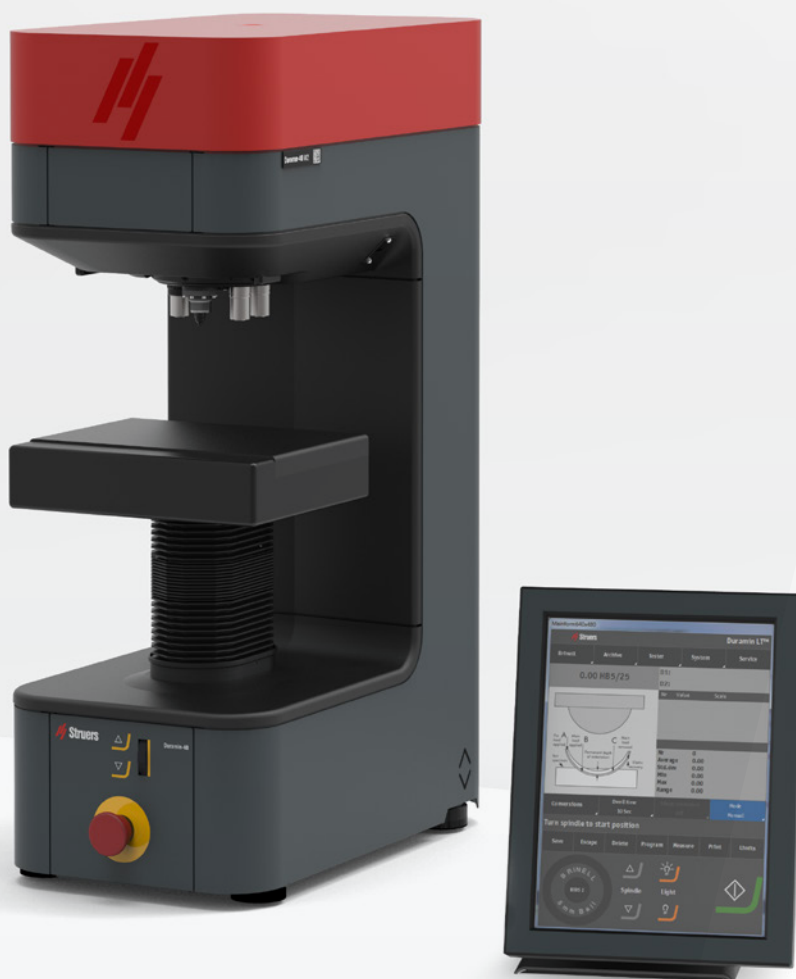

幅広い試験力範囲で高い再現性を有する多機能硬さ試験機

デュラミン-40には、手動／電動XYステージ、オーバービューカメラ、3種類の試験力範囲を用意。試験機本体には、PCが内蔵され、タッチスクリーン操作とマウス操作可能な外付けディスプレイが付属します。試験サイクルは完全自動で、自動6ポジションタレットが標準装備。オプションで、デュアルモニタに変更可能。追加モジュールにて、破壊じん性測定、マッピング、溶接測定が可能。

- ビッカース、ヌープ、ブリネルの各硬さ試験に対応
- 3つの試験力範囲を用意
 - 0.098N～98.1N(10gf～10kgf)、
 - 0.098N～306.6N(10gf～31.25kgf)
 - 9.8mN～612.9N(1gf～62.5kgf)
- 自動6ポジションタレット
- 手動／電動XYステージ
- 電動Z軸
- 衝突防止システム
- 自動照明
- オーバービューカメラ(オプション)
- レポート編集機能
- PC内蔵型でマウスまたはタッチスクリーンによる操作

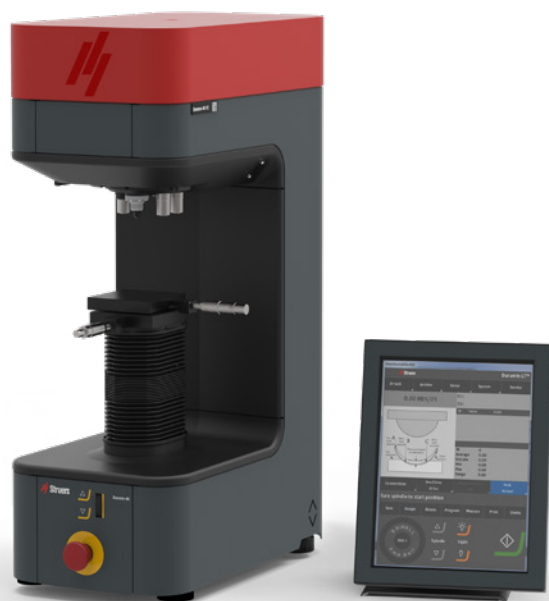

株式会社ストルアス

□ **本社** 〒 141-0022
東京都品川区東五反田三丁目 14 番 13 号
高輪ミュージビル1F
営業案内
TEL 03 (5488) 6207
FAX 03 (5793) 1081
技術サービス
TEL 03 (5488) 6236
FAX 03 (5793) 1081

□ **大阪営業所** 〒 550-0014
大阪市西区北堀江一丁目 6 番 5 号
大輪ビル 8F
TEL 06 (6532) 2661
FAX 06 (6532) 1977

□ **名古屋営業所** 〒 464-0850
名古屋市中千種区今池四丁目 4 番 1 号
玉置ビル 1F
TEL 052 (732) 1862
FAX 052 (732) 2392

弊社では、このたびお客様の製品の技術的なご質問のためにホットラインを開設いたしました。製品の不具合、技術相談等のお問い合わせは、下記のフリーダイヤルをご利用ください。

お客様窓口 ホットラインサービス

救護は— クイック
Free Dial 0120-950-919

【受付時間】 9:00 ~ 17:00 (平日のみ)

	デュラミン-40 M1/M2/M3			デュラミン-40 A1/A2/A3			デュラミン-40 AC1/AC2/AC3		
試験力とアプリケーション									
モデル	M1	M2	M3	A1	A2	A3	AC1	AC2	AC3
試験力	0.098N～ 98.1N (10 gf～ 10 kgf)	0.098N～ 306.6N (10 gf～ 31.25 kgf)	9.8mN～ 612.9N (1 gf～ 62.5 kgf)	0.098N～ 98.1N (10 gf～ 10 kgf)	0.098N～ 306.6N (10 gf～ 31.25 kgf)	9.8mN～ 612.9N (1 gf～ 62.5 kgf)	0.098N～ 98.1N (10 gf～ 10 kgf)	0.098N～ 306.6N (10 gf～ 31.25 kgf)	9.8mN～ 612.9N (1 gf～ 62.5 kgf)
ピッカース硬さ試験		可			可			可	
ヌーブ硬さ試験		可			可			可	
ブリネル硬さ試験		可			可			可	
ステージ/タレット									
XYステージ		手動			自動			自動	
XYステージ/アンビルサイズ (mm)		100x100			306x208			306x208	
XYステージのストローク、最大 (mm)		25x25			167x115			167x115	
垂直範囲 (mm)		200			200			200	
スロット深さ (mm)		170			170			170	
電動Z軸		あり			あり			あり	
電動タレット		あり			あり			あり	
タレットポジション		6			6			7	
衝突防止		あり			あり			あり	
質量 (kg)		75			80			80	
寸法 (mm)	272×471×775 (W×D×H)								
カメラ/レンズ									
オーバービューカメラ		なし			なし			あり	
オーバービューカメラ視野範囲 (mm)		-			-			200x160	
オーバービューカメラ解像度		-			-			5 MP	
評価カメラ解像度		5 MP			5 MP			5 MP	
自動照明		あり			あり			あり	
ステージ照明		あり			あり			あり	
レーザー/LED ガイド		あり			あり			あり	
デュアルビュー		なし			オプション			オプション	
ソフトウェア/モジュール									
CHD 測定		オプション			あり			あり	
エッジ検出		なし			オプション			オプション	
マッピングモジュール		なし			オプション			オプション	
溶接モジュール		なし			あり			あり	
破壊靱性測定		オプション			オプション			オプション	
レポート編集機能		あり			あり			あり	
データ出力		あり			あり			あり	
インターフェース/接続									
操作	埋込型 Windows 10 PC、15" タッチスクリーン操作。マウスとキーボードはオプション								
通信ポート	HDMI, VGA, RJ45, WLAN, USB, RS232								
WiFi		あり			あり			あり	
Bluetooth		オプション			オプション			オプション	
電源電圧	100V-240V (50/60Hz)								